



快速信息 - 设置

冰箱标签 2

冰箱标签 2 E

包装内容 冰箱标签信息 1 2



冰箱标签



外部传感器温度
(可选) 1.05 最大测量值



注意：如果您订购了带有外部传感器的冰箱标签，请将端口插入在激活设备之前，外部传感器位于其预定位置。外部传感器

放置冰箱标签？阅读按钮
见第8点



记录器ID

设置按钮

3 要激活设备，请同时按下 SET 和 READ 按钮以获取交货状态

您在睡眠模式下收到冰箱标签。显示屏
(液晶显示屏) 一片空白。3.3



注意：如果需要，请记下冰箱标签背面的激活日期。设置日历格式

激活设备 4 按 READ 更改日历格式。

注意：设备一旦启动，就无法再停止。选项 1 选项 2



超过3秒。将出现以下日历格式：dd.mm.yyyy。

注意：大约之后。60 秒内无需按冰箱标签的任何按钮
设备返回睡眠模式。从头开始。



设置日历 设置日历
__ dd yy 格式为：dd.mm.yyyy 格式为：mm.dd.yyyy
然后按 SET 保存日历格式。

设置日期和时间 激活完成 6 7

READ 按钮用于调整数字。每次按下
地 RFAD 按钮，闪烁的数字将加 1。
一旦时间设置的最后一位数字为 3

SET 按钮用于保存号码。按SET键后
按钮，下一个数字将开始闪烁。



第一个数字闪烁：
按 READ 直到出现第一个数字。
按 SET 保存数字。
以同样的方式继续处理接下来的数字，直到日期和
时间已定。

正确或更改设置？连接错误？

请参阅《了解更多》一章中的用户手册 请参阅《了解更多》一章中的用户手册

放置冰箱标签 8

激活的冰箱标签必须立即放入其预定的冰箱标签用户手册产品信息中
地点。建议将设备放置在中心位置，这一点很重要
冰箱的最佳温度观察。

外部传感器

激活设备前两小时外部

传感器必须放置在其预定位置。它

推荐且重要的是放置外部

冰箱中央的传感器可实现最佳的 Berlinger 视频技术

温度观测，避免出现错误 网站规格 扫描二维码



了解更多





快速信息 – 用户指南

冰箱标签 2

冰箱标签 2 E

温度状态 1 报警显示指示

显示 OK 显示格式的指示

附加上/下在测量模式下，当没有触发报警时，以下信息形成指示：警告符号 报警指示器




在测量模式下，当触发报警时，会出现以下信息：



2 读取历史记录 报警显示示例

OK 显示示例

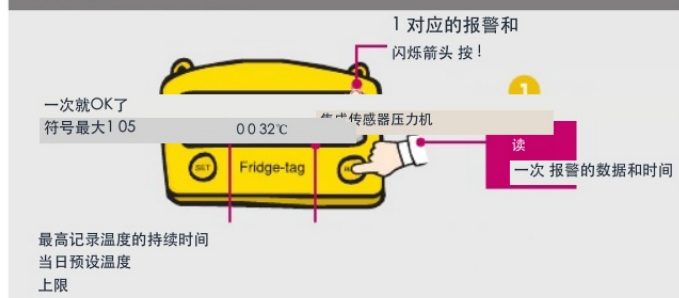

报警显示：附加信息 下载报告 3

最大限度。105 0 32 °C 再次按 READ 以获得额外的 2 信息。

注意：继续重复按READ按钮读出详细信息过去 30 天。

最大 0 32 1 05 首先按住设备上的 READ 3 秒以获取报警 - °C 超级跳跃功能

Fridge-tag 现在将生成 PDF 和 ASCII 报告。此过程可以注意：再次按住 READ 按钮至少 3 秒，屏幕将显示最多需要 2 分钟。下一个警报事件将出现在屏幕上。

确认报警？下载报告？
请参阅《了解更多》一章中的用户手册 请参阅《了解更多》一章中的用户手册



欲了解更多信息，请点击

EO: sales@eofirm.com | www.eofirm.com | 0755-84200058

